


卓上低速遠心機

LT-015

LOW SPEED CENTRIFUGE LT-015

- 最小限スペースのPRP分離用卓上低速遠心機。
- ブラシ粉が無いブラシレスのインダクションモータを採用。
- アングルロータの採用で、低G・短時間での分離/回収が可能。
- 遠心中における試料の温度上昇が最小限。
- 簡単シンプルな操作方法。

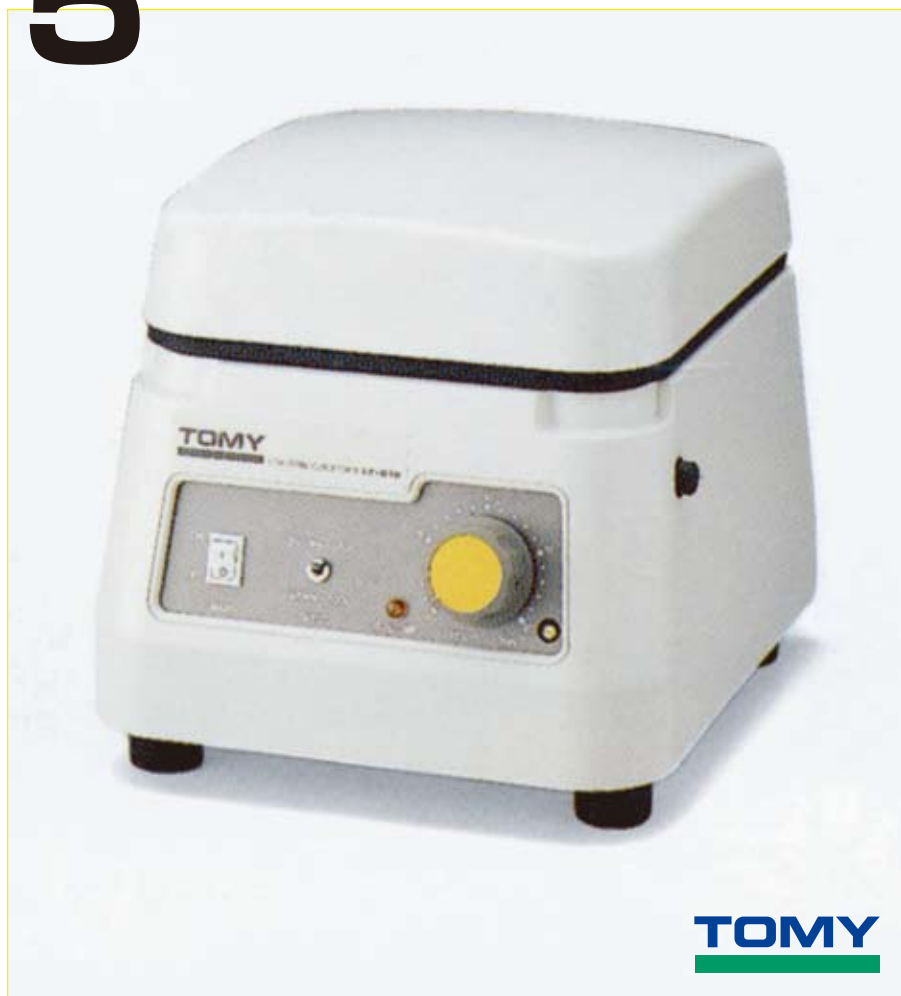

TOMY

本体仕様

- ◇ 最高回転数 2,900rpm
- ◇ 最大遠心加速度 870G
- ◇ 処理容量 15mlカルチャーチューブ×4本、採血管×4本
- ◇ 回転数設定値 1,250rpm / 2,900rpmの2段階
- ◇ 遠心加速度設定値 160G / 870Gの2段階
- ◇ 遠心タイマ 0~30分、連続
- ◇ 本体寸法、質量 . 255Wx275Dx250Hmm (突起部を含まず)、8kg
- ◇ 定格電圧 100V
- ◇ 電源入力 1A
- ◇ 必要な電源 単相AC100V(50/60Hz)15A
- ◇ 医療機器製造販売業許可番号 07B2X00007

●BDバキュティナ滅菌済み採血管 (付属アダプタ併用) 使用時の遠心加速度は、1250rpm - 130G, 2900rpm - 700G になります。

●仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。

販売元

株式会社トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
和光事業所	〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2	電話 048-466-0039
札幌	〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11	電話 022-273-5033
つくば	〒305-0067 つくば市鮎野382-1	電話 029-838-0811
神奈川	〒243-0025 厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
大阪	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
名古屋	〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜多郷802	電話 0561-61-0250
福岡	〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8	電話 092-948-1712

製造販売元

トミー工業株式会社

〒963-6217 福島県石川郡浅川町大字猿轡字山敷田62