


恒温仕様42°C



温風の吹き出しによる室内循環方式を採用。
遠心室内に熱源を露出させることなく、
安全にご使用いただけます。

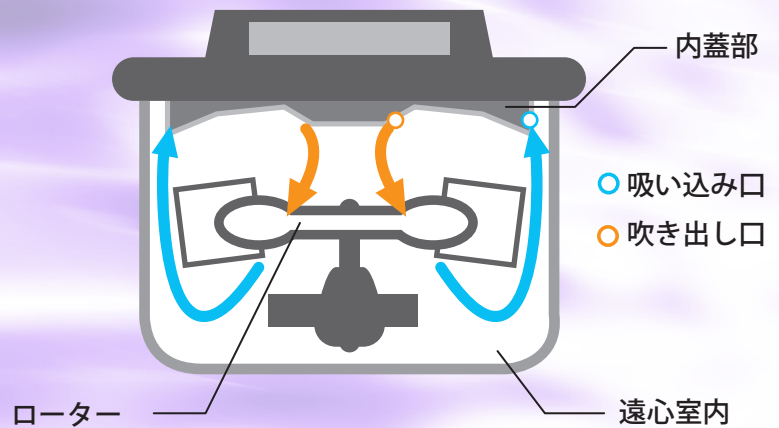


豊富なローターバリエーション

アングルローター ▶ マイクロチューブ～50mlチューブまで、全ローター Max**10,000rpm** 対応。

スイングローター ▶ 250ml×4本やコニカルチューブ 15ml×64本、マイクロプレート×16枚ほか。



この他にも
多数取り揃えて
います。

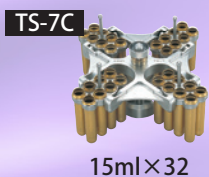

冷却機能と恒温機能を兼ね備えた実力派。-9°C～42°Cまで温度設定可能。

多本架恒温遠心機 NIX-521



TOMY

恒温仕様遠心機は、「造血幹細胞への遺伝子導入」などの用途にも使われています。



■本体仕様

型名	NIX-521
最高回転数	10,000 rpm
最大遠心加速度	11,740 G
最大容量	1,536 ml (2ml×96 穴ディープウェルプレート×8 枚)
温度設定範囲	-9~42°C (1°C毎)
駆動モーター	インダクションモーター
安全装置	・アンバランス検出 ・回転連動ドアインターロック ・ドア開閉検出 ・回転数異常検出 ・過電流遮断器 ・ローター識別 ・モーター過電流検出 ・遠心室温度異常検出 (過冷、過熱)
冷媒種類	HFC R404A (270g)
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
定格電流	13A
消費電力 (発熱量)	1,050W (903 kcal/h)
本体寸法	540W×597D×858Hmm (テーブル高さ:750)
本体質量	110 kg
価格 (税別)	1,430,000 円

販売元

<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
札幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
仙台 〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166
神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
大阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712
(物流・倉庫)
和光事業所 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2 電話 048-466-7575

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様、外観は、改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。
●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。