


ST-ZERO

廃棄物用滅菌缶


バイオセーフティキャビネット内の廃棄物の取扱いに
困っていませんか？

ST-ZEROは、バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。

縦型オートクレーブ対応

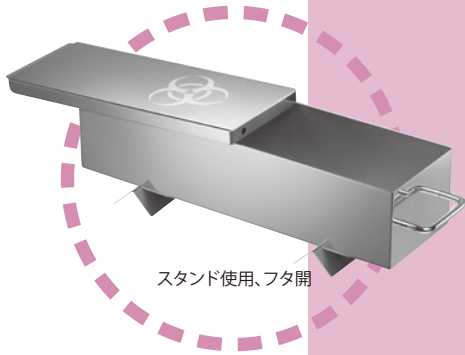

スタンド使用、フタ開

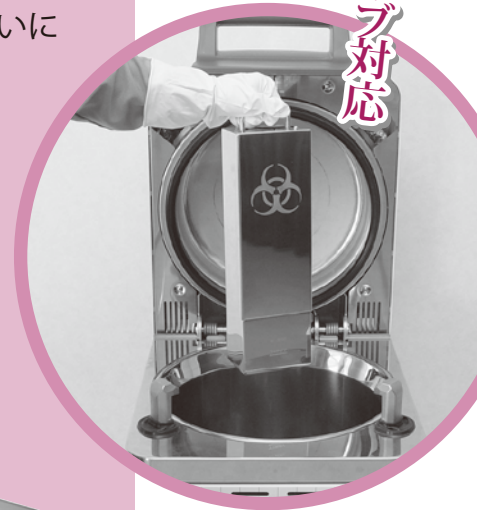


倒立時



スタンド使用、フタ開

主な特長

- バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。
- 25mlディスポーザブルピペットを25本収納可能。
- 気流への影響を抑えるスタンドが付属。(右図：設置例)
- 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。

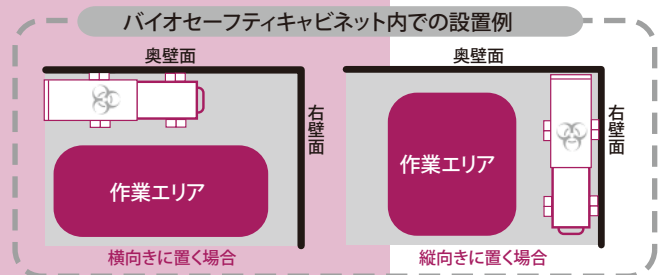

仕様

材質	ステンレススチール(SUS304)
外形寸法(mm)	106W,350D,80H(突起部 380D)
質量	1.2kg
価格(税別)	50,000円(スタンド2個付属)

販売元 <https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
札幌	〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20	電話 022-390-5375
つくば	〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5	電話 029-830-5166
神奈川	〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
名古屋	〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802	電話 0561-61-0250
大阪	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
福岡	〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15	電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17