




実績に支えられ安定したパフォーマンスを発揮する
スタンダードモデル。

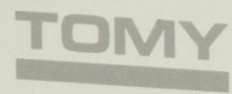

HIGH-PRESSURE STEAM STERILIZER LBS-325

LBS

シリーズ

HIGH PRESSURE STEAM STERILIZER
ラボ用 オートクレーブLBSシリーズ
LBS-325/LBS-245

ES

シリーズ

HIGH PRESSURE STEAM STERILIZER
メディカル用 オートクレーブESシリーズ
ES-315/ES-215



LBS-325

LBS-245




ES-315

ES-215

運転の動作状態がリアルタイムで確認できるMODE/PROCESS表示

LBS-325/245

滅菌モード

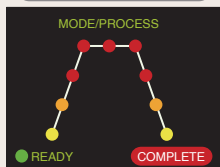


一般的な蒸気滅菌を行う滅菌モード。

ES-315/215


3つのモードプログラム内蔵

滅菌モード

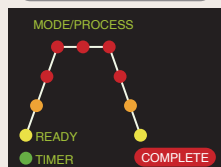


ESシリーズは、1~99時間後に
運転開始できるスタートタイマ
ー機能を内蔵しています。

滅菌・保温モード

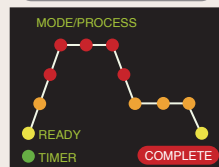

滅菌した培地をすぐに取り出さ
ない場合など、培地の凝固を防
ぐ保温機能として有効です。

加熱モード

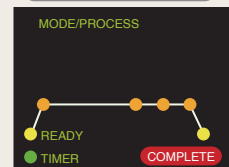

面倒な湯せんなどの培地溶解
とは異なり、その場に居なくとも
溶解に便利な加熱モード。

各種セーフティ機能が、滅菌の安全を見張ります。

滅菌用水不足検知

ドア開閉検知

過圧検知

過温検知

漏電ブレーカー

温度センサー故障検知

空焚き検知

安全弁

アクセサリー



ステンレスカゴ
カゴ全体がパンチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。



バスケット
滅菌バッグの滅菌に最適。下部は穴なし構造です。




ステンレスバケツ
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのバケツです。



ダーラム管試験用スタンド
培地入り試験管の滅菌にも便利。そのままスタンドにもなります。



滅菌バッグ
機種の缶体や耐熱温度に合わせた滅菌バッグを各種用意しました。

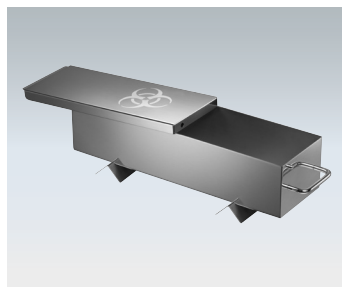

廃棄物用滅菌缶 ST-ZERO
バイオセーフティキャビネット内の廃棄物を収納。そのままオートクレーブで滅菌処理可能です。

主な仕様

型名	LBS-325	LBS-245	ES-315	ES-215
使用温度範囲	105 ~ 132℃	105 ~ 123℃	105 ~ 132℃ (滅菌時)	105 ~ 123℃ (滅菌時)
最高使用圧力	216 kPa	147 kPa	216 kPa	147 kPa
温度計 表示形式/範囲	デジタル/-15 ~ 180℃			
圧力計 表示形式/範囲	アナログ/0 ~ 400kPa	アナログ/0 ~ 250kPa	アナログ/0 ~ 400kPa	アナログ/0 ~ 250kPa
熱源	電気ヒーター 2KW	電気ヒーター 1.5KW	電気ヒーター 2KW	電気ヒーター 1.5KW
安全装置	●缶体内・缶体外壁過熱防止 ●缶体内圧力異常上昇防止 ●温度センサー断線検知 ●空焚き防止 ●漏電ブレーカー ●バネ式安全弁			
時間 表示形式/範囲	デジタル/1 ~ 240分及び連続		デジタル/滅菌モード：1 ~ 240分及び連続、 滅菌保温モード：1 ~ 240分 (滅菌時)・1 ~ 8時間 (保温時)、 加熱モード：1 ~ 8時間	
圧力容器の種類	小型圧力容器	容器 (簡易圧力容器)	小型圧力容器	容器 (簡易圧力容器)
缶体寸法/容量	φ 325×740 mm/53 ℓ	φ 248×543 mm/22 ℓ	φ 325×740 mm/53 ℓ	φ 248×543 mm/22 ℓ
有効寸法	φ 312×635 mm	φ 236×450 mm	φ 312×635 mm	φ 236×450 mm
本体寸法/質量	490 W × 560 D × 1,090 Hmm 操作テーブルまで875 mm/80 kg	400 W × 460 D × 920 Hmm 操作テーブルまで705 mm/50 kg	490 W × 560 D × 1,090 Hmm 操作テーブルまで875 mm/80 kg	400 W × 460 D × 920 Hmm 操作テーブルまで705 mm/50 kg
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 20A	単相 AC100V 50/60Hz 15A	単相 AC100V 50/60Hz 20A	単相 AC100V 50/60Hz 15A
消費電力 (発熱量)	2KW (1,720Kcal/h)	1.5KW (1,290Kcal/h)	2KW (1,720Kcal/h)	1.5KW (1,290Kcal/h)
付属品	スノコ付きステンレスバスケット (内缶一体式) 1個、設置確認書 1部、取扱説明書 1部			
医療器具の種類	—	—	特定保守管理医療機器	特定保守管理医療機器
医療機器製造販売承認番号	—	—	22200BZX00312000	22200BZX00310000
価格 (税別)	710,000 円	590,000 円	770,000 円	640,000 円

●ステンレスカゴは別売り

販売元

<https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
札幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
仙台 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375
つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166
神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
大阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
福岡 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / トミー沖繩/ボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
●このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。