

Wonder Spin

小型微量遠心機

1本でも遠心！




＼遠心らくらく／
One Spin

毎日使うものだから、私は楽々が好き。



＼持ち運びらくらく／
Multi Spin

電池でも遠心！

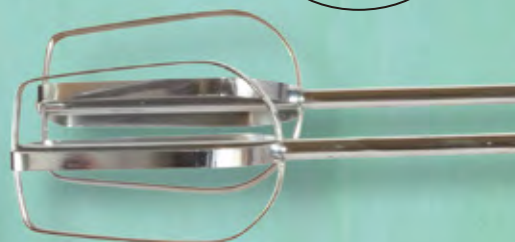

TOMY


Wonder Spin

One Spin

ワンスピン

スピンドウン専用機。
1本でもらくらく遠心! ✓

ダミーチューブが無くてもチューブ1本で遠心ができるようにしました! (特許出願済)

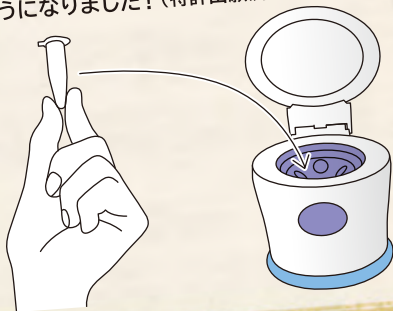

押さえるだけの、シンプル操作!
フタをロックする手間を
省きました。 ✓

① セット



② 押さえて
(遠心スタート)




③ 離す
(ストップ)



チューブが
取り出しやすい!

コンパクトながら少しでもチューブ
が取り出しやすく、またスピンドウ
ンに必要な角度になるよう回転と
共に遠心方向にチューブが傾斜す
る構造を採用。

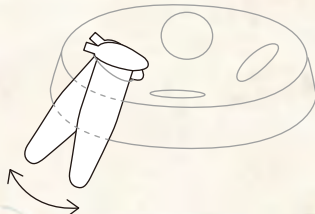

海外でも使用可能^{※1} ✓

交換用プラグが付属していて、
100~240Vの海外でも使用が
可能です。

CE



スクリーキャップチューブ
にも対応。 ✓


コンパクトでキュート!

まるでテーブルに置いたマグカップのよ
うなコンパクトサイズです。

● 試料がチューブ壁面に付着したまま残ることがあります。

持ち運び自在！

コンセント&電池のどちらでもOK！
電源がない場所やクリーンベンチ内でも、マルチに活躍します。
さらに、海外対応100～240V仕様。※1

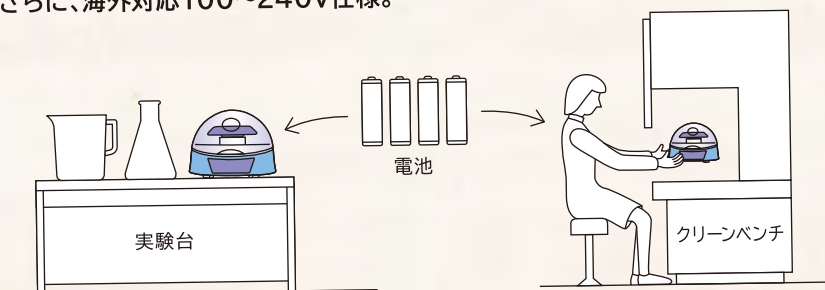

海外

CE




■付属品
・専用ACアダプター
・交換用プラグ



ローター2種付属




2mlチューブ×8本

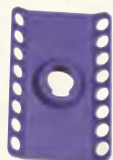

PCR 8連チューブ
×2組

プッシュで開閉！

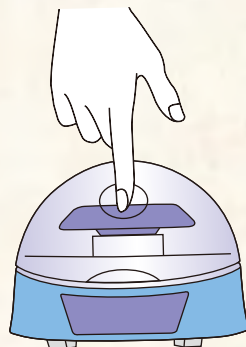

リッドオープン連動ブレーキ

タイマー内蔵：6分

※1 当製品を日本国外へ持ち出す場合は、輸出貿易管理令及び外国為替令等輸出規制関連法令の規定により手続きが必要となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

Multi Spin

マルチスピン



Wonder Spin

●故障の原因になりますので、高温・低温や多湿になる場所での使用、及び保管はしないでください。

Wonder Spin LINE UP



One Spin



Multi Spin

本体仕様

型 式 名 称	One Spin	Multi Spin	
口 ー タ ー	—	MA-1	PA-1
使 用 チ ュ ー ブ	1.5(2)mlマイクロチューブ×4本	1.5(2)mlマイクロチューブ×8本	PCR8連チューブ(0.2ml×8本)×2列
定 常 回 転 数	4,000rpm (±20%)	6,000rpm (±20%)	6,200rpm (±20%)
遠 心 加 速 度	420～950G (1.5ml) 450～1,000G (2ml)	1,260～2,840G (1.5ml) 1,310～2,960G (2ml)	最大 1,200～2,690G 最小 810～1,820G
タ イ マ ー	—	6 分間固定	
安 全 装 置	リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出		
外 形 寸 法	105W×130D×96H mm	150W×163D×113H mm	
質 量	380g	600g (ローター及び電池含まず)	
必 要 な 電 源	専用 AC アダプター 入力：単相 AC100-240V 50/60Hz 0.6A	専用 AC アダプター 入力：単相 AC100-240V 50/60Hz 0.6A または単 3 形アルカリ乾電池 ×4 本	
医療機器製造販売業許可番号	07B2X00007		
価 格 (税 別)	39,000 円	49,000 円	



- 付属品
- ・専用 AC アダプター
 - ・交換用プラグ

販売元

<https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本 社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
 札 幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
 仙 台 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375
 つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166
 神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
 名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
 大 阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
 福 岡 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

製造販売元

トミー工業 株式会社

〒963-6217 福島県石川郡浅川町大字簗輪字山敷田62

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様・外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。