

TOMY



マイクロチューブミキサ MT-400

1.5mℓ チューブを40本。または、5mℓ チューブを12本同時に攪拌。
1本1本手に持つことなく、効率良くミキシングが可能です。

渦 が 混 ぜ る。

チューブ内では渦が底まで達し、サンプルを力強く攪拌します。



パワーアップで
5mℓチューブにも対応!
(オプション)

**お得な
バリューセット**

MT-400 本体
[1.5(2)mℓ用ラック付属]

+

5mℓ用ラック

||

149,000円

7,000円もお得!

詳しくは裏面をご覧ください。

VORTEX MIXER



ボルテックスで、 楽しく混ぜる。つよーく混ぜる。

1本1本手に持つことなく、ボルテックスマシンと同様の攪拌を行うことができます。また、チューブの下部が大きく振られる振とう方式で、強い攪拌力を発生します。

選べる攪拌力

緩やかな攪拌から渦巻きを発生させる強力な振とうまでチューブを見ながら調整できます。

コンパクトボディ

300W × 135D × 150H mm のスリムなボディサイズで、インキュベータの中に置くこともできます。

偏心振動方式

独自の偏心振動方式により、チューブ位置によるバラツキがない、効率の良い攪拌をお約束します。

着脱式チューブラック

チューブラックは簡単にはずせるので、チューブをセットしたまま移動したり、試験管立てとして利用できます。

■主な用途 ・細胞の懸濁液を調製 ・定量用試薬の混合 ・試料の均一な倍散 ・その他攪拌作業全般

■本体仕様

型名	MT-400
攪拌方式	偏心振動方式
攪拌本数	1.5(2)ml × 40本 (ラック:TR4002 付属) 5ml × 12本 (ラック:TR4005 オプション)
チューブラック	着脱式
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
本体寸法(突起物は除く)	300W×135D×150Hmm
本体質量	3.2kg
価格(税別)	139,000円


※5mlコニカルチューブもご用意しています。PT0050-11(250本入)【4,500円】

■オプション




チューブラックカバー (TC4000)

強く振とうする場合はチューブラックカバーの使用を推奨します。
[1.5(2)ml ラック専用]【5,800円】

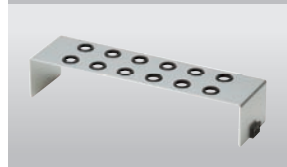

5ml チューブ用ラック (TR4005)


5ml チューブを12本同時に攪拌できます。【17,000円】

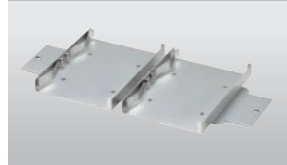

マイクロプレート用ラック (PR4096)

マイクロプレートを2枚同時に攪拌できます。【22,000円】

お得なバリューセット 本体とオプションの5mlチューブ用ラックを合わせてご購入いただくと…

 MT-400 [1.5(2)ml用ラック付属] 139,000円	+	 5mlチューブ用ラック 17,000円	=	通常合計価格 156,000円	⇒	7,000円お得! バリューセット合計価格 149,000円
--	---	--	---	-------------------------------	---	--

販売元

株式会社 トミー精工

URL:<http://bio.tomys.co.jp>

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17
札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7
仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11
つくば 〒300-0847 土浦市卸町1-5-5

電話 03-5987-3111
電話 011-728-1311
電話 022-273-5033
電話 029-830-5166

神奈川 〒243-0025 厚木市上落合351-1
大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6
名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802
福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8

電話 046-220-5371
電話 06-6305-3333
電話 0561-61-0250
電話 092-948-1712

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様、外観は、改良のための予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。
●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。