




■ 試験管ラック 130mm(写真:左)

試験管ラック130mmは、標準ラックの上段、下段にそれぞれ4個セットできます。
試験管ラック1個には、試験管(Ø15mm×h105mm)を108本セットできます。

■ 試験管ラック 210mm(写真:右)

試験管ラック210mmは、標準ラックの下段に4個セットできます。
試験管ラック1個には、試験管(Ø21mm×h200mm)を58本セットできます。

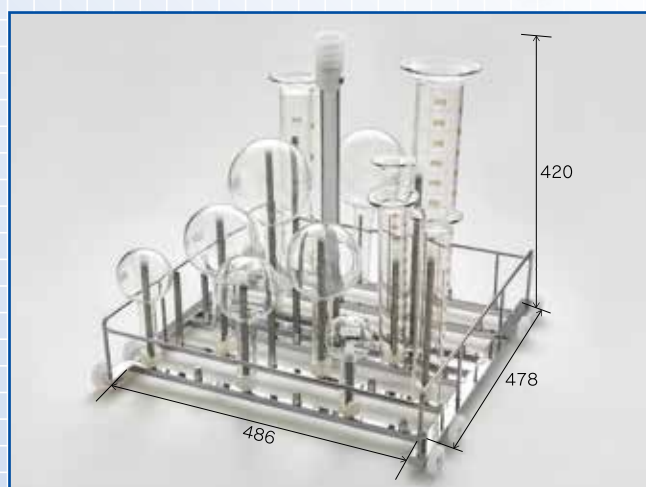


■ ジェットラック (内部洗浄ノズル36ヶ所)

フラスコ・メスシリンダをセットできるノズル36本とラックスプリング(300mm)6本を付属します。
ノズル間の距離は約80mmです。
ノズルとラックスプリングは別売可能です。



■ ラックスプリング

ジェットラックやビーカラックなどに取り付け、器具の固定ができます。
長さは180mmと380mmがあります。

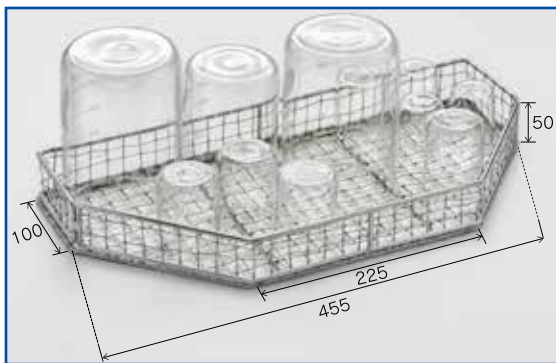

■ ビーカラック

ビーカラックは標準ラックの上段、下段にそれぞれ2個セットできます。

ビーカ50mLの場合 30個(注)

ビーカ100mLの場合 19個(注)

ビーカ500mLの場合 7個

ビーカ1000mLの場合 5個セットできます。

(注)軽い容器が飛ばないように、ビーカラック用カバー等をご使用ください。





■ ビーカラック用カバー

小容量のビーカーや計量の器材が洗浄水で飛ばないようにカバーとして使用します。

漏水検知セット

機器周辺の漏水を検知し給水を遮断する、センサと自動弁のセットです。センサが液体を検知すると漏水を知らせるブザーを発報し、連動して給水元に設置した自動弁が給水を止め、漏水の拡大を防止します。

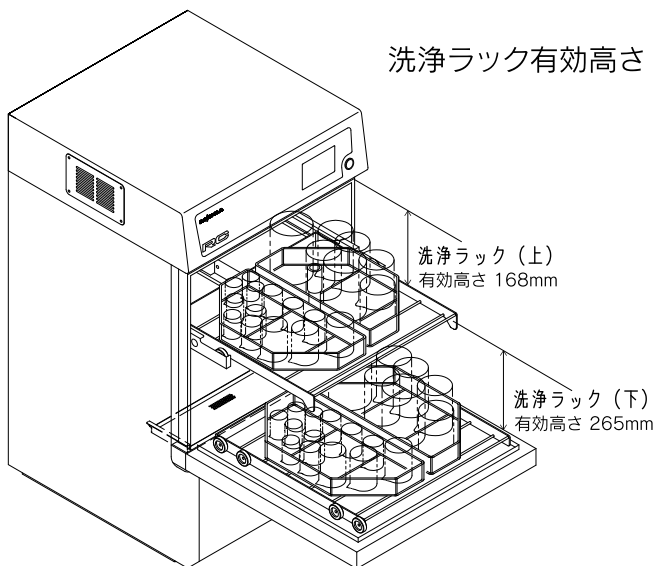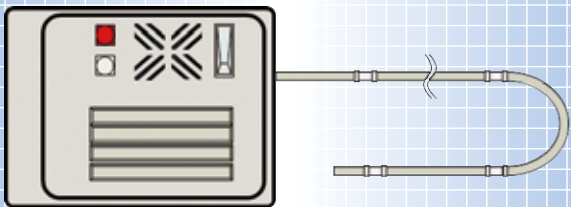

安全に関するご注意

・商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

◎輸出に関するご注意：本カタログの製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制品に該当する場合は、輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。輸出される場合には、弊社営業担当にお問い合わせください。

三浦工業株式会社

愛媛県松山市北条辻864番地1 〒799-2430
TEL 089-960-2666 FAX 089-960-2667
<http://www.miuraz.co.jp>
東証一部上場 証券コード 6005



ミウラは Fun to Share に参加しています

製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
本カタログの内容は日本国内仕様です。
本カタログに関するお問い合わせは最寄りの販売店・営業所へどうぞ。

札幌	北海道札幌市西区発寒5条4丁目8-11 〒063-0825 TEL:011-664-3596 FAX:011-664-3617
仙台	宮城県仙台市宮城野区岩切分台3丁目1-2 〒983-0828 TEL:022-396-1811 FAX:022-396-1810
埼玉	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目32番1 〒331-0804 TEL:048-662-2606 FAX:048-667-2943
東京	東京都港区高輪2丁目15-35 三浦高輪ビル2F 〒108-0074 TEL:03-5793-1046 FAX:03-5793-1050
名古屋	愛知県清須市西田中蓮池95番 〒452-0933 TEL:052-409-3360 FAX:052-409-3370
大阪	大阪府東大阪市西石切町7丁目5-1 三浦大阪ビル3F 〒579-8502 TEL:072-980-5847 FAX:072-980-5848
松山	愛媛県松山市堀江町1201-2 〒799-2651 TEL:089-979-1113 FAX:089-979-2278
福岡	福岡県福岡市博多区上牟田1丁目24番20号 三浦福岡ビル3F 〒812-0006 TEL:092-413-7102 FAX:092-414-0614